


クリアビュールーペ仕様変更について

クリアビュールーペ TTLタイプのライト取付具に仕様変更がございました。

2025.5月頃からの入荷分は仕様変更品となっております。

仕様変更前後で下記写真にある様に取付具の形状が変更され付け替える事が、できなくなっております。
ご注文時される時にはご注意ください。

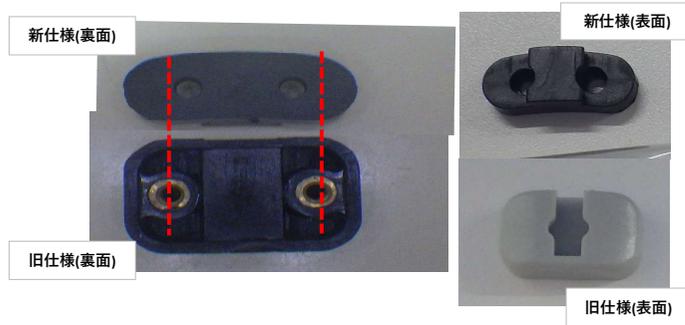

上記写真にある様にルーペに取り付ける為のネジが通る穴の位置が違う為
旧仕様と新仕様には互換性はありません。



NewLEDコンパクトライト (旧仕様)

商品コード 上段シルバ-下段ブラック	部品名	商品	備考
31052 (31053)	カメラF/New LED,LEDライト共通		①-1ライト3枚9+①-2ライトアレート=カメラF ②は①-1と①-2を合わせることでカメラF NewLEDライト・LEDライト共通
39308 (39307)	ライト3枚9-/New LED,LEDライト共通		
39310 (39309)	ライトアレート/New LED,LEDライト共通		
32097 (32098)	カメラE/New LED,LEDライト共通		NewLEDライト・LEDライト共通
29986 (29987)	ライト3枚9-/New LED,LEDライト共通		②カメラEに取り付ける部品
32880 (32881)	カメラG/New LED,LEDライト共通		
32887 (32886)	ライト接続部/New LED,LEDライト共通		NewLEDライト・LEDライト共通
105024 (105030)	ライト部/NewLEDコンパクトライト		
105040	LEDコンパクトライト/レンズフィルター		
101242	LEDコンパクトライト/USBケーブル		カメラライト共通
118244 (118243)	New LEDコンパクトライト用カメラ	No image	

NewLEDコンパクトライト構成【100411 シルバ-/100412 ブラック】



取付具組付状態



NewLEDコンパクトライト（新仕様）

商品コード [※] 上段シルバー-下段ブラック	部品名	商品	備考
なし (119953)	新フレーム用ライト挿入クリップ		BKのみ 付属でネジ×2 ナット×2が付いています
119103 (111333)	ライト装着用パーツ / NewLED ライト・LEDライト		LEDライトに付いているクリップを外し②ライト装着用パーツに付け替えます。 ※ルーベに付いている接続部は外しませんのでご注意ください
32887 (32886)	ライト接続部 / NewLEDライト・LEDライト		NewLEDライト・LEDライト共通
105024 (105030)	ライト部/NewLEDコンパクトライト		
105040	LEDコンパクトライト/レンズフィルター		
101242	LEDコンパクトライト/USBケーブル		ワンタッチライト共通
118244 (118243)	New LEDコンパクトライト用バッククリップ	No image	

NewLEDコンパクトライト構成【100411シルバー-/100412ブラック】

