


クリアビュールーペ仕様変更について

クリアビュールーペ TTLタイプのライト取付具に仕様変更がございました。

2025.5月頃からの入荷分は仕様変更品となっております。

仕様変更前と後で下記写真にある様に取付具の形状が変更され付け替える事が、できなくなっております。

ご注文時される時にはご注意ください。

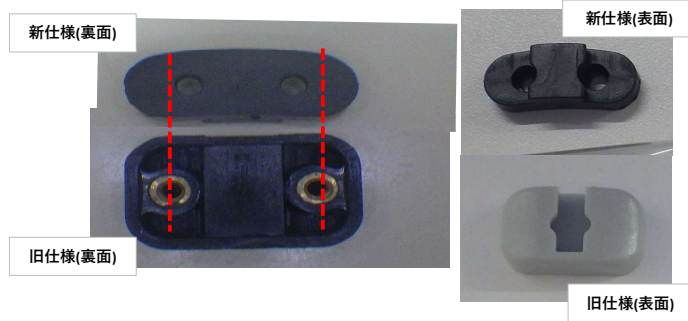


上記写真にある様にルーペに取り付ける為のネジが通る穴の位置が違う為
旧仕様と新仕様には互換性はありません。






番号	商品コード 上段ｼﾙﾊﾞｰ/下段ﾌﾞﾗｯｸ	部品名	商品	備考
①	29849 (29850)	ｲﾄﾛ-ﾌｧｲﾙﾀｰ / NewLED ライト		New LEDﾗｲﾄのみ取付可能
②	29990 (29991)	ｲﾄﾛ-ﾌｧｲﾙﾀｰ / LEDﾗｲﾄ		LEDﾗｲﾄのみ取付可能
③	31052 (31053)	ｸﾘｯﾌﾟ F/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		③-1ﾗｲﾄｺﾅｸﾀｰ + ③-2ﾗｲﾄﾌﾞﾚｰﾄ = ｸﾘｯﾌﾟ F ③は③-1と③-2を合わせることでｸﾘｯﾌﾟ F NewLEDｺﾝﾊﾟｸﾄﾗｲﾄ共通
③-1	39308 (39307)	ﾗｲﾄｺﾅｸﾀｰ/New LEDLEDﾗｲﾄ共通		
③-2	39310 (39309)	ﾗｲﾄﾌﾞﾚｰﾄ/New LEDLEDﾗｲﾄ共通		
④	32097 (32098)	ｸﾘｯﾌﾟ E/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		NewLEDｺﾝﾊﾟｸﾄﾗｲﾄ共通
④-1	29986 (29987)	ﾗｲﾄｺﾅｸﾀｰ/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		④ｸﾘｯﾌﾟ Eに取り付ける部品
⑤	32880 (32881)	ｸﾘｯﾌﾟ G/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		
⑥	32885 (32884)	ﾗｲﾄ接続ﾎﾞｰﾀﾞ/NewLEDﾗｲﾄ		LEDﾗｲﾄのみ取付可能
⑦	32887 (32886)	ﾗｲﾄ接続部/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		NewLEDｺﾝﾊﾟｸﾄﾗｲﾄ共通
1699 (6573)		中間ﾎﾞｰﾀﾞ/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		
22549		共用ACﾌｧﾀｰﾀｰ/New LED,LEDﾗｲﾄ共通		
29994 (29995)		ｺｰﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ /NEWLED、LEDﾗｲﾄ共通		
29992 (29993)		ﾊﾞｯﾃﾘｰｸﾘｯﾌﾟ /NEWLED、LEDﾗｲﾄ共通		
28888 (28887)		替ﾗｲﾄﾊﾞｰｽﾞ/NewLEDﾗｲﾄ		New LEDﾗｲﾄ専用 (中間ﾎﾞｰﾀﾞ付き) 32097 (32098) のｸﾘｯﾌﾟはついて おりません
28886 (28885)		替ﾗｲﾄﾊﾞｰｽﾞ/LEDﾗｲﾄ		LEDﾗｲﾄ専用 (中間ﾎﾞｰﾀﾞ付き) 32097 (32098) のｸﾘｯﾌﾟはついて おりません
28876 (111629)		NewLEDﾗｲﾄ 共用予備ﾊﾞｯﾃﾘｰ		NewLEDﾗｲﾄ/LEDﾗｲﾄ共通

NewLEDﾗｲﾄﾊﾟｰﾂ構成【28168ｼﾙﾊﾞｰ/27709ﾌﾞﾗｯｸ】

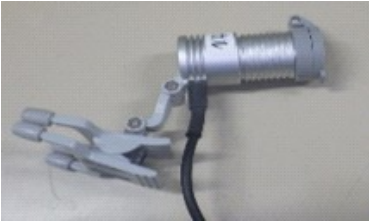




取付具組付状態

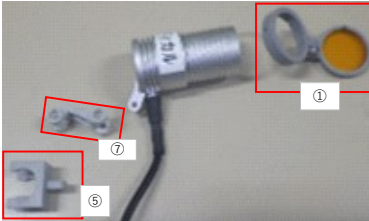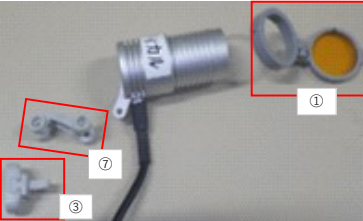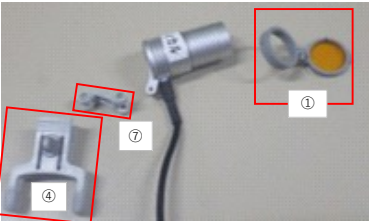

LEDﾗｲﾄﾊﾟｰﾂ構成【25909ｼﾙﾊﾞｰ/25910ﾌﾞﾗｯｸ】



取付具組付状態

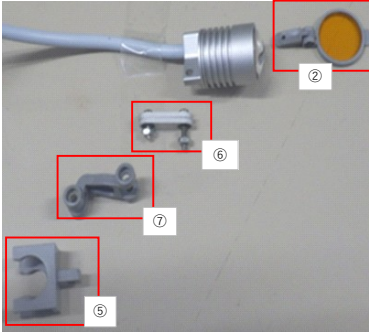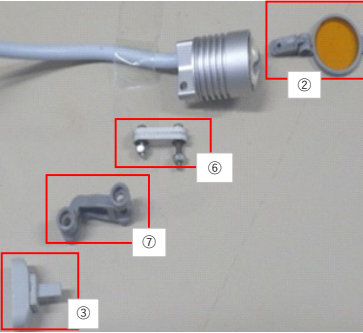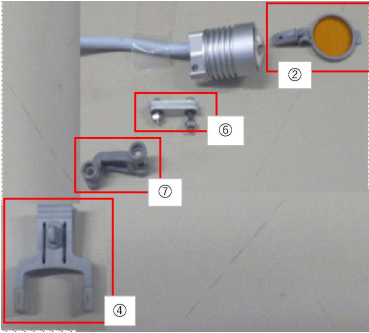

番号	商品コード	上段シルバー/下段ブラック	部品名	商品	備考
①	なし (119953)		新フレーム用ライト挿入クリップ		BKのみ 付属でネジ×2 ナット×2が付いています
②	119103 (111333)		ライト装着用パーツ / NewLED ライト・LEDライト		LEDライトに付いているクリップを外し②ライト装着用パーツに付け替えます。 ※ルーペに付いている接続部は外しませんのでご注意ください
③	32887 (32886)		ライト接続部 / NewLEDライト・LEDライト		LEDコシボ 外ライト共通
④	32885 (32884)		ライト接続ピン / LEDライト		LEDライトのみ取付可能
	1699 (6573)		中間ケーブル / NEW LED、LEDライト共通		
	22549		共用ACアダプター / NEW LED、LEDライト共通		
	29994 (29995)		コードクリップ / NEWLED、LEDライト共通		
	29992 (29993)		バッテリークリップ / NEWLED、LEDライト共通		
	28888 (28887)		替ライトパーツ / NewLEDライト		New LEDライト専用 (中間ケーブル付き) 32097 (32098) のクリップはついておりません
	28886 (28885)		替ライトパーツ / LEDライト		LEDライト専用 (中間ケーブル付き) 32097 (32098) のクリップはついておりません
	28876 (111629)		NewLEDライト 共用予備バッテリー		NewLEDライト/LEDライト共通

NewLEDライトパーツ構成【28168シルバー/27709ブラック】



LEDライトパーツ構成【25909シルバー/25910ブラック】

